

FILTRES A EAU MEDICAUX

GAMME CLASSE STERILE 70

FICHE PRODUIT



INFORMATIONS GÉNÉRALES

La sécurité des patients et du personnel est primordiale. Particulièrement dans les zones à haut risque telles que les unités critiques, les services de soins intensifs et les salles d'opérations. Un des principaux risques vient des infections bactériologiques causés par les douches et robinets contaminés microbiologiquement. Les pathogènes présents dans l'eau peuvent s'accumuler en biofilms situés dans les systèmes de plomberie, même si l'eau est désinfectée à l'entrée d'un bâtiment. Les pathogènes peuvent par la suite être transmis aux patients lorsque l'eau est utilisée pour leurs soins. Pentair, un spécialiste dans les solutions de purification de l'eau offre une gamme complète de filtres à membrane pour le point d'utilisation pour les douches et les robinets. Cette gamme a été conçue spécialement pour les établissements médicaux. Les parties plastique du filtre contiennent un additif antimicrobien conçu pour réduire la rétrocontamination et la contamination croisée.

AVANTAGES

- Protège des bactéries en suspension comme la légionnelle et les Pseudomonas.
- Certifié Classe Médicale 1S Stérile
- Pour les zones à haut risque tels que les unités critiques ou unités de soins intensifs et salles d'opérations
- Contrôle permanent des infections

APPLICATIONS

Les filtres médicaux stériles Pentair Water offrent une protection dans les zones à haut risques d'infection de l'eau. Ils fournissent une protection facile et fiable au plus proche du patient et du personnel.

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES ET D'OPÉRATION

Type de filtration

Membranes capillaires de microfiltration

Taille de pore

0,2 µ

Capsule de jet plastique

Additif Antimicrobien réduisant la rétrocontamination et la contamination croisée

Pression d'utilisation max.

5 bar (72,5 psi)

Température d'utilisation

0 - 50 °C (0 - 158 °F); 70 °C pour 30 min.
 @ 2 bar pour la durée de vie du produit

Tenue au chlore

1,200 ppm pour un total de 10 heures sur la durée de vie du produit.

Stockage et manipulation







- Durée de stockage: 2 ans
- Garder au sec, protéger du gel après la première utilisation
- Manipuler avec précaution, éviter les chocs.
- Produit jetable, disposer comme un produit standard.

FILTRES A EAU MEDICAUX

GAMME CLASSE STERILE 70

FICHE PRODUIT

SPECIFICATIONS DE LA CARTOUCHE FILTRANTE & DONNÉES DE PERFORMANCES

| MODELE | MSF-SCSS70 | MSF-SCRC70 | MTFW-SCSS70 | MTFW-SCRC70 | MTFD-SCSS70 | MTFD-SCRC |
|-------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| NOM DE MODÈLE | Douche Filtrante Médicale, Kit de démarrage | Douche Filtrante Médicale, Cartouche de remplacement | Robinet filtrant médical Jet douche, Kit de démarrage Standard | Robinet filtrant médical Jet douche, Cartouche de remplacement | Robinet filtrant médical, Jet droit, Kit de démarrage Standard | Robinet filtrant médical Jet droit, Cartouche de remplacement |
| DIMENSIONS MAX | 136 x 63 mm | 88 x 63 mm | 136 x 63 mm | 88 x 63 mm | 136 x 63 mm | 88 x 81 mm |
| POIDS | 240 g | 150 g | 240 g | 150 g | 240 g | 150 g |
| CONNECTION | 1/2 inch BSP/NPT clip | système de blocage exclusif | 22 mm filetage intérieur ^[1] | système de blocage exclusif | 22 mm filetage intérieur ^[1] | système de blocage exclusif |
| DÉBIT INITIAL @ 2 BAR | 9 l/min [2.4 Gpm] ^[2] | 9 l/min [2.4 Gpm] ^[2] | 4 l/min [1 Gpm] ^[3] | 4 l/min [1 Gpm] ^[3] | 4 l/min [1 Gpm] ^[3] | 4 l/min [1 Gpm] ^[3] |
| DURÉE DE VIE VALIDÉE | 70 jours (10 semaines) | | | | | |
| BIOLOGICAL RETENTION ^[4] | Bacteria > log 7 / Fungi > log 4 | | | | | |

^[1] adaptateur de 24 mm, filetage z1/2"

^[2] limiteur de flux recommandé


^[3] limiteur de flux obligatoire

^[4] se référer au guide de validation


Certification produit: Les Filtres à eau médicaux répondent aux normes édictées par la directive sur les appareils médicaux 93/42/EEC, Annexe VII et sont enregistrés comme un produit de classe Is, règlement I.

CE
0344

FILTRE DOUCHE

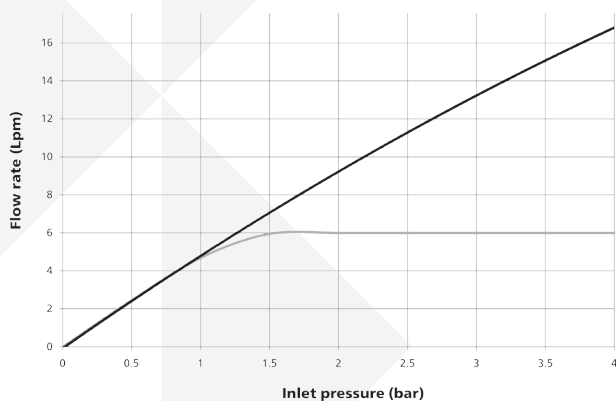

FILTRE ROBINET

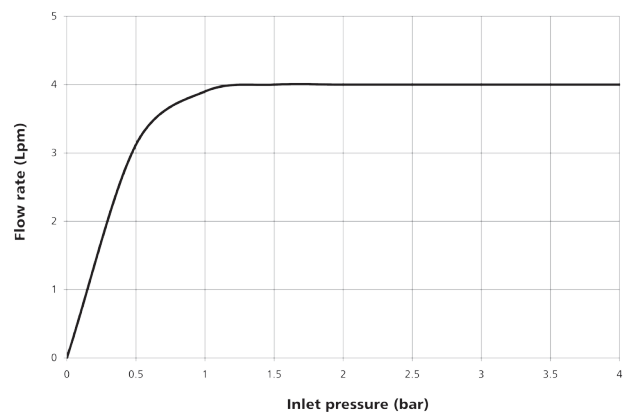

Avvertimento: Les informations et données sont à titre indicatives uniquement. Puisque les conditions dans lesquelles nos produits fonctionnent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les informations sur la garantie de nos produits peuvent être trouvées dans le manuel de l'utilisateur.



X-FLOW BY

P.O. BOX 739, 7500 AS ENSCHEDE, NETHERLANDS WWW.X-FLOW.COM

Toutes les marques déposées et logos sont la propriété de Pentair. Toutes les autres marques ou noms de produits sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Puisque nous améliorons en continu nos produits et services, nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans information préalable.

Pentair est un employeur à égalité d'opportunités.

DS MWF SC70 FR 3015 © 2015 Pentair. Tous droits réservés.

