


## FILTRES A EAU MEDICAUX SERIE STANDARD ST70

FICHE PRODUIT

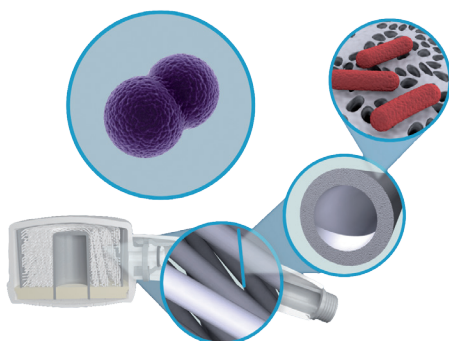

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

La sécurité des patients et du personnel est primordiale. Non seulement dans les zones à haut risques tels que les unités critiques et les unités de soins intensifs et les salles d'opérations, mais aussi dans les zones à risques moyens telles que les cuisines, et les chambres de patients. Un des principaux risques vient des infections bactériologiques causés par les douches et robinets contaminés microbiologiquement. Les pathogènes présents dans l'eau peuvent s'accumuler en biofilms situés dans les systèmes de plomberie, même si l'eau est désinfectée à l'entrée d'un bâtiment. Les pathogènes peuvent par la suite être transmis aux patients lorsque l'eau est utilisée pour leurs soins. Pentair, un spécialiste dans les solutions de purification de l'eau offre une gamme complète de filtres à membrane pour le point d'utilisation pour les douches et les robinets.

Cette gamme a été conçue spécialement pour les établissements médicaux.

### AVANTAGES

- Protège des bactéries en suspension comme la légionnelle et les Pseudomonas.
- Classe médicale CE I
- Pour les zones de risques moyens comme les cuisines et chambres de patients
- Protection pour les situations d'épidémies ou de contrôle permanent des infections.

### APPLICATIONS

Les Filtres médicaux Standard Pentair offrent une protection dans les zones de risques moyens (non stérile) lorsqu'il y a un risque d'infection de l'eau.

Ils fournissent une protection facile et fiable au plus proche du patient et du personnel.

### SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES ET D'OPÉRATION

#### Type de filtration

Membranes capillaires de microfiltration

#### Taille de pore

0,2 µ

#### Pression d'utilisation max.

5 bar (72,5 psi)

#### Température d'utilisation max.

0 - 50 °C (0 - 158 °F); 70 °C pour 30 min.  
⊘ 2 bar pour la durée de vie du produit

#### Tenue au chlore

1,200 ppm pour un total de 10 heures sur la durée de vie du produit

#### Stockage et manipulation







- Durée de stockage: 2 ans
- Garder au sec, protéger du gel après la première utilisation
- Manipuler avec précaution, éviter les chocs.
- Produit jetable, disposer comme un produit standard

# FILTRES A EAU MEDICAUX

## SERIE STANDARD ST70

FICHE PRODUIT

### SPECIFICATIONS DE LA CARTOUCHE FILTRANTE & DONNÉES DE PERFORMANCES

MODELE	MSF-STSS70	MSF-STRC70	MTFW-STSS70	MTFW-STRC70	MTFD-STSS70	MTFD-STRC70
						
NOM DE MODÈLE	Douche Filtrante Médicale Kit de démarrage	Douche Filtrante Médicale, Cartouche de remplacement	Robinet filtrant Médical Jet douche, Kit de démarrage Standard	Robinet filtrant Médical Jet douche, Cartouche de remplacement	Robinet filtrant Méd. Jet droit, Kit de démarrage Standard	Robinet filtrant Médical. Jet droit, Cartouche de remplacement
DIMENSIONS MAX.	136 x 63 mm	88 x 63 mm	136 x 63 mm	88 x 63 mm	136 x 63 mm	88 x 81 mm
POIDS	240 g	150 g	240 g	150 g	240 g	150 g
CONNECTION	1/2 pouce BSP/NPT	système de blocage exclusif	22 mm filetage interne <sup>(1)</sup>	système de blocage exclusif	22 mm filetage interne <sup>(1)</sup>	système de blocage exclusif
INITIAL FLOWRATE @ 2 BAR	9 l/min [2.4 Gpm] <sup>(2)</sup>	9 l/min [2.4 Gpm] <sup>(2)</sup>	4 l/min [1 Gpm] <sup>(3)</sup>	4 l/min [1 Gpm] <sup>(3)</sup>	4 l/min [1 Gpm] <sup>(3)</sup>	4 l/min [1 Gpm] <sup>(3)</sup>
DUREE DE VIE VALIDEE	70 jours (10 Semaines)					
RETENTION BIOLOGIQUE <sup>(4)</sup>	Bacteries > log 7 / Fungi > log 4					

<sup>(1)</sup> adaptateur de 24 mm, filetage z1/2"

<sup>(2)</sup> limiteur de flux recommandé


<sup>(3)</sup> limiteur de flux obligatoire

<sup>(4)</sup> se référer au guide de validation


**Certification produit:** Les Filtres à eau médicaux répondent aux normes édictées par la directive sur les appareils médicaux 93/42/EEC, Annexe VII et sont enregistrés comme un produit de classe I



#### FILTRE DOUCHE

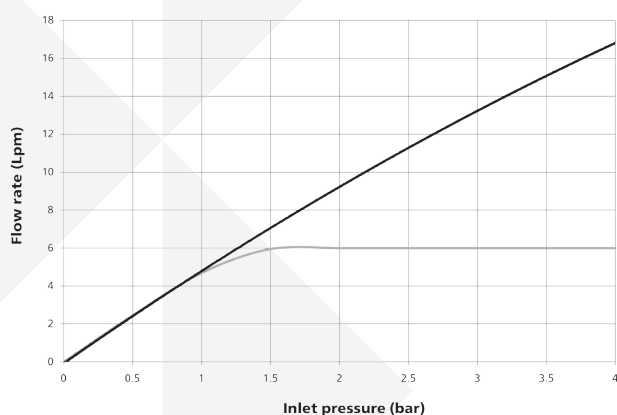

#### FILTRE ROBINET

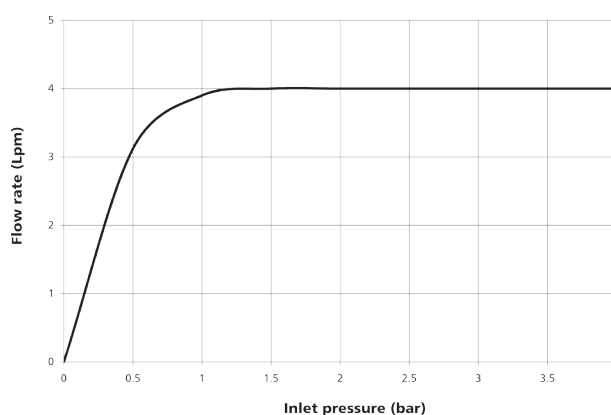

**Avvertissement:** Les informations et données sont à titre indicatives uniquement. Puisque les conditions dans lesquelles nos produits fonctionnent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les informations sur la garantie de nos produits peuvent être trouvées dans le manuel de l'utilisateur.



X-FLOW BY

P.O. BOX 739, 7500 AS ENSCHEDE, NETHERLANDS WWW.X-FLOW.COM

Toutes les marques déposées et logos sont la propriété de Pentair. Toutes les autres marques ou noms de produits sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Puisque nous améliorons en continu nos produits et services, nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans information préalable.

Pentair est un employeur à égalité d'opportunités.

DS MWF ST70 FR 3015 © 2015 Pentair. Tous droits réservés.

